

Composites ventura



Неотъемлемая часть
множества улыбок по всему миру

*M*adespa

ПО ВСЕМУ МИРУ БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО БОЛЕЕ 15 МИЛЛИОНОВ РЕСТАВРАЦИЙ

КАЧЕСТВО, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ

Композиты компании **VENTURA** – идеальное сочетание современных технологий и простоты в использовании.

Количество успешных реставраций показывает высокое качество композитов **VENTURA**. Более того, их соответствующие требованиям клинические характеристики подтверждены клиническими исследованиями.

Простота в обращении, точность подбора цвета и высокий коэффициент надежности – ключевые характеристики для создания хорошей реставрации, а в результате – довольный пациент.

Композиты **VENTURA** отвечают высоким требованиям к текучим свойствам материала и работе с ним. Эти преимущества можно увидеть в исследованиях, проведенных Международным университетом Каталонии, результаты которых показывают высокий уровень надежности композитов.

ПРОСТОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДБОР ЦВЕТА

Более **90%** реставраций выполняются с использованием одного тона, потому происходит минимизация временных затрат работы в стоматологической клинике.

Для достижения желаемого эстетического результата, композиты **VENTURA** обеспечивают реставрацию с эффектом хамелеона, при котором лессировочность, опалесценция и флюоресценция являются ключевыми факторами, благодаря которым материал влияет на тон эстетики и привлекательности реставрации.



Madespa
www.madespa.com

[*] Первичные исследования проведены Национальным университетом Каталонии.




ventura **similux**


Универсальный фотополимеризуемый наногибридный композит, который обеспечивает реставрацию с длительным сроком службы. Его более чем 20-летнее существование на рынке и успешное удовлетворение требований к качеству делают **VENTURA SIMILUX** общепотребительным композитом, отвечающим запросам, как специалистов по зубам, так и их пациентов.

Выделяются следующие примечательные механические свойства:

Твердость по Барколу: клинически влияет на износ и стойкость поверхности к начальным повреждениям в пломбе.

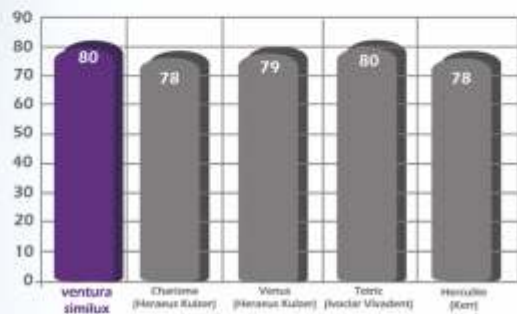

Высокий предел прочности при сжатии: означает, что **VENTURA SIMILUX** идеально подходит для пломб класса I и класса II

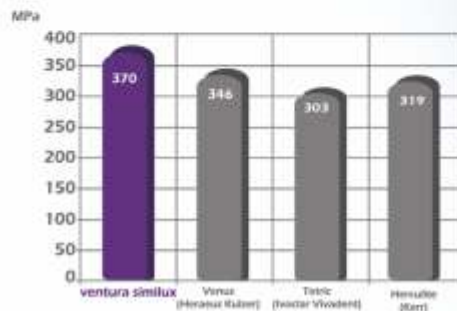

Шероховатость поверхности: после полирования это свойство является важнейшим при эстетической реставрации



ventura **similux flow**


Жидкотекучий композит с более низким усадочным напряжением, чем большинство других композитов.

Во время полимеризации все композитные материалы имеют свойство усадки, так как мономеры связываются поперечной межмолекулярной связью и занимают меньше пространства/объема, при полимеризации материала. Усадочное напряжение во время склеивания может повлиять на качество краевого прилегания. Следовательно, усадка полимеризации должна быть как можно ниже. Использование **VENTURA SIMILUX FLOW** обеспечивает максимальное краевое прилегание, защищая, таким образом, от послеоперационной чувствительности, обесцвечивания краев и вторичного кариеса.



VENTURA SIMILUX FLOW обеспечивает более продолжительную работу под рабочим светильником, благодаря способности высокой сопротивляемости к преждевременной полимеризации.

VENTURA SIMILUX FLOW не содержит мономеров (**TEGDMA** и **HEMA**), минимизируя таким образом проблемы, связанные с токсичностью, и повышенной чувствительностью.

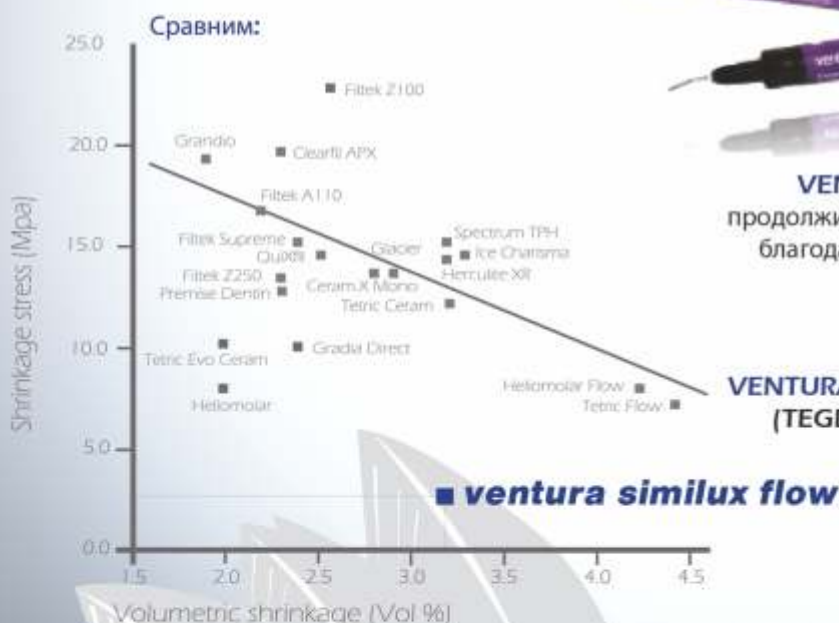

ventura similux flow


ventura nanolux

Универсальный фотополимеризуемый наногибридный композит, с помощью которого производится реставрация высочайшего качества центральных и боковых зубов.

Шероховатость поверхности (полирование):


после полирования реставрация приобретает натуральный блеск, который еще больше способствует улучшению имитации тона.

Среднее значение индекса шероховатости для разных композитов

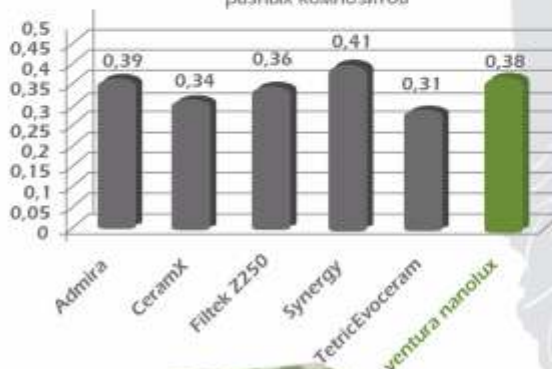

Стойкость к окрашиванию: играет важную роль при обеспечении длительного эстетического эффекта.

Сравним:

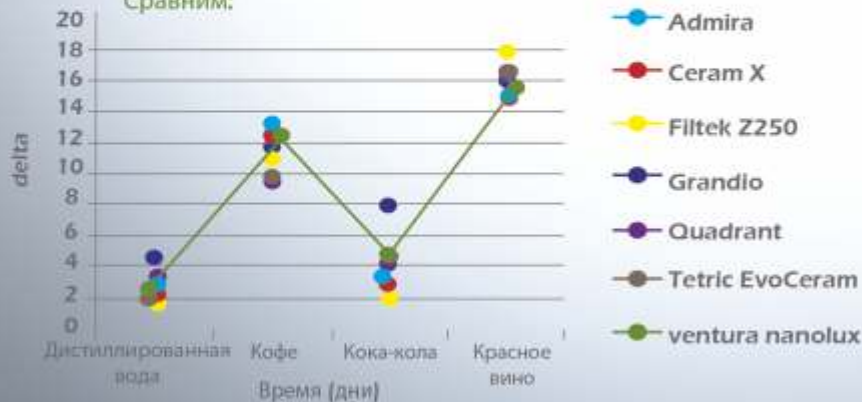

(* Первичные исследования проведены Национальным университетом Каталонии)



ventura **dual core built**

Жидкий композит двойного отверждения для восстановления культи. Большие, объемные реконструкции могут производиться за короткий промежуток времени.

Особенности при восстановлении культи:

- ✓ **Индекс эластичности совпадает со стекловолоконным штифтом**
Усилия на восстановленную часть распределяются равномерно, исключая риск появления трещины при реставрации.
- ✓ **Высокая степень изгиба и прочность на сжатие**
Обеспечивает стабильность под коронкой.
- ✓ **Твердость, приближенная к дентину**
Позволяет провести точную конечную подготовку при препаровке культи.
- ✓ **Идеальная текучесть**
Предотвращает формирование воздушных пор вокруг штифтов.
- ✓ **Высокая степень прилипания к эмали, дентину и стекловолоконным штифтам**
Помогает при продолжительных реставрациях.
- ✓ **Оптимальная светопропускаемость**
Обеспечивает хорошую и глубокую полимеризацию.
- ✓ **Рентгеноконтрастное вещество**
Позволяет точно определить структуру реконструкции.



Оформление заказа и упаковка

ventura **nanolux**

1160 - A1 - 4g; 1161 - A2 - 4g;
1162 - A3 - 4g; 1163 - A3,5 - 4g;
1204 - A4 - 4g; 1164 - B2 - 4g;
1165 - C2 - 4g; 1173 - A2 - 6g;
1174 - A3 - 6g; 1167 - Kit 7 s;
1168 - Intro Kit 4 s.



ventura **similux**

Ref:
1630 - A1 - 4g; 1631 - A2 - 4g;
1632 - A3 - 4g; 1633 - A3,5 - 4g;
1634 - A4 - 4g; 1636 - B2 - 4g;
1639 - C2 - 4g; 1643 - Kit 7 s;
1645 - Intro Kit 4 s.



ventura **flow**

Ref:
1594 - A1 - 3,4 g + 12 tips;
1595 - A2 - 3,4 g + 12 tips;
1596 - A3 - 3,4 g + 12 tips;
1597 - A3,5 - 3,4 g + 12 tips;
1599 - Kit 4 s.



ventura **dual core buit**

Ref:
1956 - Universal - 5 ml + 10 endo tips +
10 mixing tips.
1950 - ventura mixing tips DC - 25 u.
1951 - ventura endo tips DC - 25 u.

ventura **unibond2**

Ref:
1816 - 5 ml.

Сопутствующий товар

ventura **seal**

Pit and fissure
sealant.

Ref:
1298



ventura **etching gel**

Orthophosphoric
acid 37%.

Ref:
1694 - 6 ml - (2x3 ml) + 8 tips.
1695 - 12 ml - (4x3 ml) + 12 tips.
1697 - 10 ml - (1x10 ml) + 10 tips.
1700 - 26 ml - (2x10 ml + 2x3 ml) + 10 tips.



ventura **brush**

Applicators.

Ref:
1309 - ventura brush blue 100 u.
1310 - ventura brush yellow 100 u.



ventura

Gel and flow
composite tips.

Ref:
1709 - 25 u.



*good
fillings*



Madespa
www.stomamed.com.ua

г. Житомир, пл. Победы, 9
+38 (0412) 42-09-12
+38 (097) 478-27-05
+38 (050) 623-86-57
+38 (063) 014-28-92

Rio Jarama, 120 - 45007 - TOLEDO
ESPAÑA (SPAIN)
www.madespa.com